


Nosebud⁺

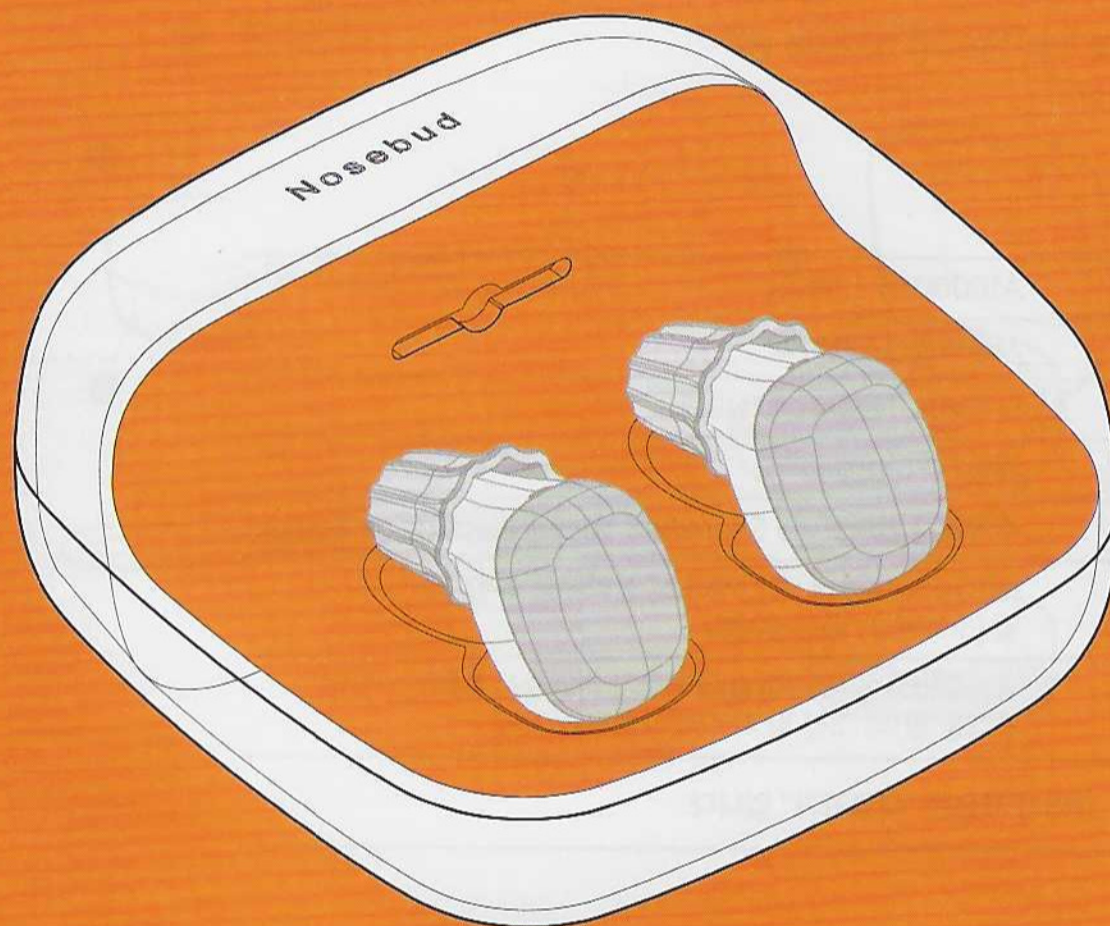

사용설명서 / 보증서

01 광치리기 효능

660nm 적색 파장과 940nm 근적외선 파장을 콧속의 비염환부에 조사하여 계절성 알레르기성 비염증상을 완화 시켜 줌

I 660nm 적색 파장 : 항산화 작용, 비염증상 완화
660nm의 적색 LED 파장은 활성산소를 억제하고 점막 진피세포의 활력을 강화하여 비염증상을 완화 시킴

I 940nm 근적외선 파장 : 알레르기 반응 억제, 비염증상 완화
940nm의 근적외선 파장은 비만세포(Mast Cell)의 적절한 히스타민 생성을 유도하여 알레르기 반응을 억제함

I 알레르기성 비염 : 코 점막이 특정물질에 대하여 과민반응을 나타내는 것
알레르기를 나타내는 원인물질에 코 점막이 노출된 후 자극부위로 염증세포가 몰려들어 이들이 분비하는 다양한 매개물질에 의해 염증반응이 발생하는 질환

원인 : 반려동물의 털, 미세먼지, 꽃가루, 진드기, 기온변화 등
증상 : 콧물, 코막힘, 가려움, 재채기

02 제품개요

의료기기 인증 [등급]	A16060.02 [2등급]
품목명	저출력광선조사기
제품명[모델명]	노즈버드, Nosebud [NB1]
인증번호	제인24-648호
제조사	주식회사 엔티브이 / Shenzhen Yuefull Electronics Co., Ltd
포장단위	[NB1]1Set (본체, 충전케이스, 실리콘팁 4개) 및 [소독용UV충전케이스]
사용목적	광선요법을 통해 계절성 알레르기 비염증상 (재채기, 콧물, 가려움 등)의 개선 및 치료에 사용되는 기기

[NB1] 제품은 "의료기기" 입니다.

03 제품사양

내부전원	DC 3.7V
파장(주파수)	660nm & 940nm
출력(형태)	연속동작
동작시간	약 3분
안전장치	1. 3분간 작동 후 자동으로 전원 OFF 2. 전원 스위치 3초간 터치하면 전원 OFF
전기충격에 대한 보호형식 및 보호정도	내부전원기기, BF형 기기

04 제품구성

[NB1] 노즈버드 본체 2, 휴대용 충전케이스 1, 실리콘팁 보관통 1, 실리콘팁 4 (일반형2, 슬림형2), 사용자매뉴얼 1, (충전케이블은 포함되어 있지 않습니다.)

[소독용UV충전케이스] 충전케이스 1

A. 노즈버드[NB1]

- ① 노즈버드 본체

② 광가이드


③ 전원 스위치(터치)

④ 상태 표시등
- ⑤ 충전 케이스 본체

⑥ 상태 표시등

⑦ USB-C 충전 단자

⑧ 휴대용 끈

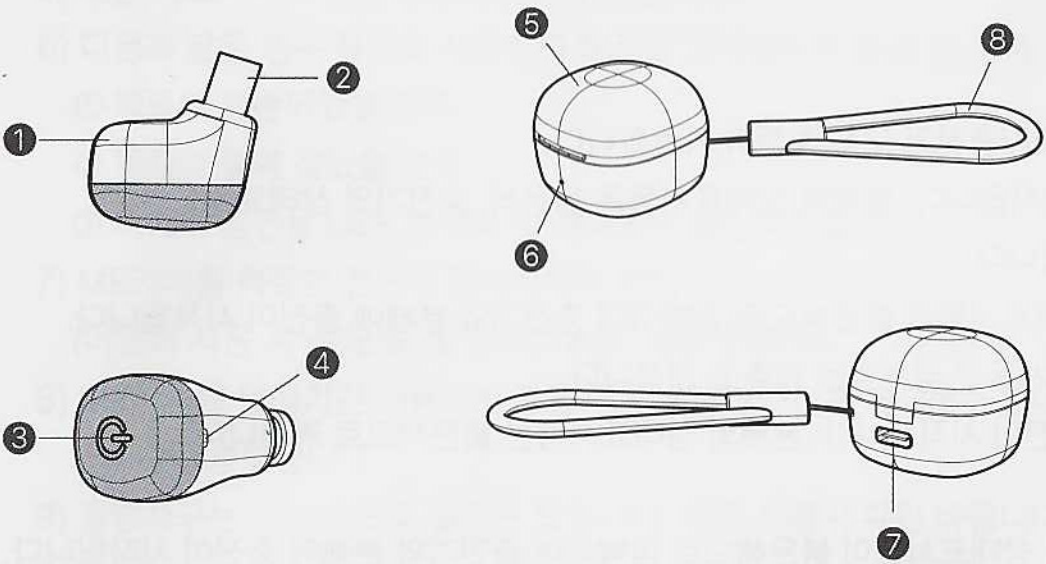



B. 소독용 UV충전케이스

- ⑨ 충전 UV케이스 본체

⑩ UVC 소독등

⑪ 상태 표시등

⑫ USB-C 충전 단자

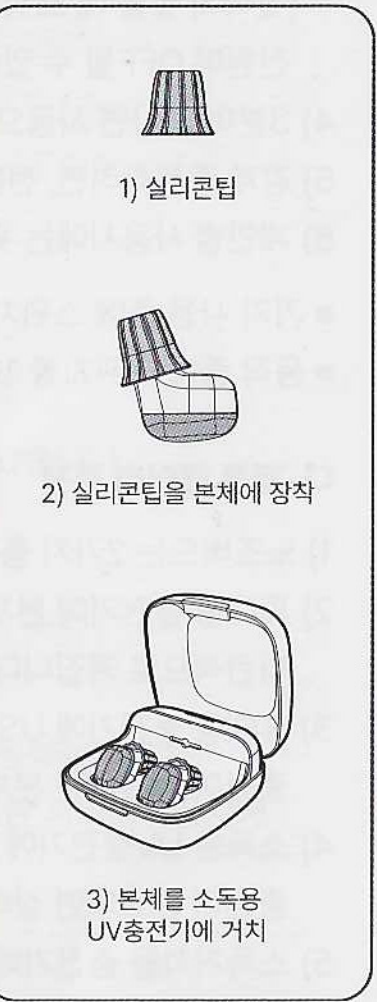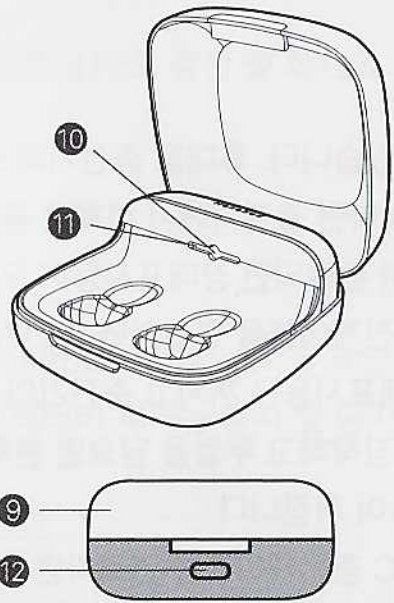

05 사용 방법

가. 사용 전 준비사항


- 1) 전원을 켜기 전에 제품의 사용 장소와 환경이 적절한지 확인해 주십시오.
- 2) 장비의 주변에 옆질러져 장비에 영향을 줄 수 있는 액체를 두지 않습니다.
- 3) 충전 시 전기적 스파크로 전극에서 인화성 액체, 가스 점화가 일어날 수 있으므로, 기기를 사용하기 전에 반드시 인화성 가스가 있는지 확인하고 주의합니다.
- 4) 강렬한 전기가 흐르는 근접지역, 자기장이 흐르는 곳, 가열이나 습도에 노출될 수 있는 지역을 피합니다.
- 5) 본체(저출력광선조사기)가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
- 6) 본 제품을 정해진 용도 외의 다른 용도에는 절대로 사용하지 마십시오.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 동봉된 실리콘팁을 본체 광가이드에 장착합니다. (일반형과 슬림형 2가지가 있습니다.)
- 2) 본체의 전원스위치를 1초동안 터치하면 3분간 광가이드에 불이 들어옵니다.
- 3) 실리콘팁이 장착된 부분을 콧속에 부드럽게 밀어 넣습니다.
(콧속에 넣을 때 스위치가 3초 이상 터치되지 않도록 하시기 바랍니다. 3초이상 터치될 경우 전원이 OFF될 수 있습니다.)
- 4) 3분이 지나면 자동으로 불이 꺼짐과 동시에 전원이 Off 됩니다.
- 5) 강제 종료하려면, 전원스위치를 3초간 터치하면 전원이 Off 됩니다.
- 6) 개인별 사용시에는 위생을 위해 별도의 실리콘 팁을 구입하여 사용하시기 바랍니다.

※ 기기 사용 중에 스위치가 3초이상 터치되어 전원이 꺼지지 않도록 하시기 바랍니다.

※ 동작 중에 스위치를 1초이상 터치하면 다시 3분간 작동하게 됩니다.

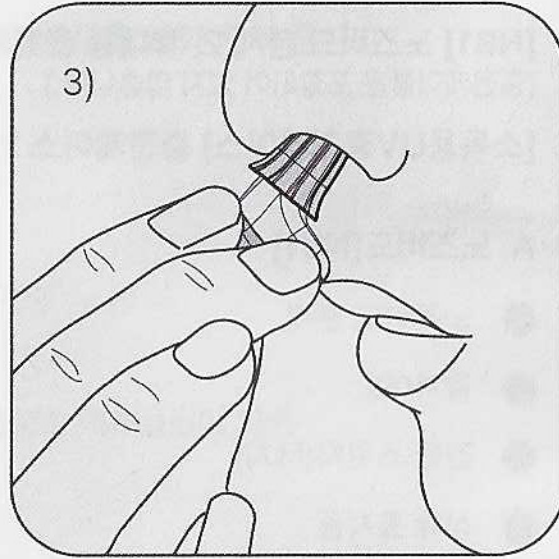

다. 제품 배터리 충전

- 1) 노즈버드는 2가지 충전기가 있습니다. 휴대용 충전기와 소독용 UV충전기 모두 충전이 가능합니다.
- 2) 휴대용 충전기에 본체를 장착하면 충전기에서 본체로 충전이 시작됩니다. 본체의 상태표시등은 붉은색, 충전기의 상태표시등은 파란색으로 켜집니다. 충전이 완료되면 상태표시등이 모두 꺼집니다.
- 3) 휴대용 충전기에 USB-C 충전케이블을 연결하면 충전기의 상태표시등이 붉은색으로 깜빡이며 충전기와 본체에 충전이 시작됩니다. 충전이 완료되면 본체의 상태표시등은 꺼지고 충전기의 상태표시등은 깜빡임을 멈추고 켜집니다.
- 4) 소독용 UV충전기에 본체를 장착하고 뚜껑을 닫으면 본체로 충전이 시작됩니다. 본체의 상태표시등은 붉은색으로 켜집니다. 충전이 완료되면 상태표시등이 꺼집니다.
- 5) 소독거치용 충전기에 USB-C 충전케이블을 연결하면 충전기의 상태표시등이 붉은색으로 깜빡이며 충전기와 본체에 충전이 시작됩니다. 충전이 완료되면 본체의 상태표시등은 꺼지고 충전기의 상태표시등은 깜빡임을 멈추고 켜집니다.
- 6) 소독거치용 충전기에는 UVC 자외선등이 내장되어 있습니다. 충전기 뚜껑을 닫으면 파란색 등이 켜지고 UVC소독등이 작동됩니다. UVC소독등과 파란색등은 뚜껑을 열면 꺼지고 닫으면 다시 켜집니다. UVC소독등과 파란색등은 3분후에 자동으로 꺼집니다. (UVC소독등을 눈으로 직접 보지 마십시오).

라. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 사용한 실리콘 팁을 재사용하기 위해서는 제품에서 분리 후 알코올 솜으로 닦거나, 물에 세척한 후 완전히 건조시킨 뒤에 사용해 주시기 바랍니다.
- 2) 사용 후 기기를 청소할 경우에는 반드시 USB충전 케이블을 기기에서 분리한 후, 기기표면의 먼지, 피지 등은 부드러운 마른 헝겊이나 휴지로 닦아주십시오.
- 3) 기기 변형이 있을 수 있으므로, 상온에 보관하며 고온 다습한 곳을 피합니다.
- 4) 화학약품 보관 장소나 가스발생 장소에 보관하지 않습니다.

5) 장기간 사용하지 않을 때에는 반드시 제품과 충전기를 분리해 주시기 바랍니다.

6) 진동이나 충격으로부터 안전한 곳에 보관합니다.

7) 유아가 쉽게 손이 닿지 않는 장소에 보관해 주십시오.

06 사용시 주의사항

가. 경고

- 1) 제품을 임의로 분해/수리/개조하지 마십시오.
- 2) 의사의 처방 지도에 따라 사용 사용하십시오.
- 3) 젖은 손으로 전원을 연결하지 마십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 4) 제품 위에 액체 물질을 쏟지 마십시오.
- 5) 다른 의료기기와 병행하여 사용하지 마십시오.
- 6) 다음과 같은 경우 절대로 사용하지 마시고 고객센터로 점검 및 서비스를 의뢰하십시오. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
 - ① 제품이 파손되었을 경우
 - ② 제품이 물에 젖었을 경우
 - ③ 배터리 충전용 USB 컨넥터 및 케이블이 손상되었을 경우
- 7) ME기기를 적절한 전원에 접속하여야 한다.
(어댑터 사용 시 KC인증 및 정격(Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.35A, Output: 5Vdc, 1A)을 확인하여 사용하십시오.)
- 8) ME기기를 일정기간 사용하지 않을 경우에는 배터리를 제거해주십시오. 단, 배터리 제거는 당사 및 당사가 지정한 서비스제공자에 의해서만 수행됩니다.
- 9) 광방사구는 광가이드 및 실리콘 팁입니다. 제품 사용시 확인 바랍니다.

나. 사용대상의 연령, 성별 또는 건강상태 등에 대한 주의사항

- 1) 전 연령이 사용 가능합니다. 단, 피부가 빛에 민감하다면, 민감한 피부에 소량의 감응 테스트를 한 후 사용하시고, 광과민증 환자는 본 제품을 사용하지 마십시오. 또한 임부, 수유부, 가임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자의 사용을 금합니다.
- 2) 어린이들이 기기를 혼자서 만지거나 사용하지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 광선요법 대상자는 폴립증과 부비강염을 배제하기 위하여 가능한 경우 반드시 내시경 검사를 받을 것.
- 4) 다음과 같은 사람은 사용시 의사와 상담 후 사용을 결정하십시오.
 - 급성질환자
 - 사용부위의 피부가 이상이 있는 사람
 - 고열환자
 - 악성종양환자
 - 지각장애가 있는 사람

다. 의료기기 사용결과 발생할 수 있는 의료기기 이상반응, 사용상의 부주의에 따른 치명적인 부작용 · 사고 발생 등에 대한 주의사항

- 1) 적외선은 눈에 보이지 않습니다. 적외선 LED들의 동작여부를 확인하기 위하여 눈을 적외선 LED 가까이 대지 마십시오.
- 2) 다음과 같은 경우에는 반드시 의사와 상의한 후에 제품을 사용하십시오.
 - ① 각종 질환이 있거나 의심되는 경우
(악성종양환자/암환자/고열환자/기력이 극도로 쇠약해진 사람/생명연장 기구 사용자 등)
 - ② 피부에 닿아 알레르기를 일으키거나 열에 과민반응을 보이는 경우
 - ③ 최근에 수술한 환자, 임산부.
 - ④ 제품이 닿는 피부에 염증이나 외상이 있는 경우 등

라. 일반적 주의

- 1) 충전 케이블을無理하게 감거나 구부리지 마십시오. 고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 2) 제품 위에 촛불, 담배, 술 등의 인화물질 또는 물이 담긴 그릇, 무거운 물건, 날카로운 물건 등을 올려놓지 마십시오. 감전, 화재 및 파손의 원인이 됩니다.
- 3) 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 4) 유기성 용매(벤젠, 신나 등)로 기기를 닦지 마십시오.
- 5) 제품을 난로와 같은 전열기구로부터 멀리하십시오.
- 6) 전원버튼에 너무 힘을 주어 사용하지 마십시오. 제품고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 7) 충전 케이블이 연결된 상태에서 케이블을 잡고 휘두르거나 돌리지 마세요. 부상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

마. 상호작용에 대한 주의사항

- 1) 다른 기기와 병용을 하면 위험이 발생될 우려가 있으니 주의하십시오.
- 2) 빛에 대한 알레르기 반응이 있거나, 이러한 반응을 일으킬 수 있는 약물을 복용 시에는 사용하지 않는다.
- 3) 전기적 충격에 위해가 될 수 있는 물체는 함께 사용하지 않도록 한다.
- 4) 알코올 또는 가연성 액체/기체와 함께 사용하지 않도록 한다.

바. 임부, 수유부, 가임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자 사용에 대한 주의사항

- 1) 임산부, 수유부, 가임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자는 피부가 예민하여 알레르기를 일으킬 수 있으므로 사용을 삼가 하십시오.

사. 적용상의 주의

- 1) 제품을 햇빛이나 불 등의 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 2) 제품을 사용하기 전과 사용하는 동안에는 스킨케어 제품이나 화장품, 의약품 코 및 코 주위에 바르지 마십시오.
- 3) 피부가 예민한 분은 의사와 상의 후에 사용하십시오.
- 4) 뜨거움이 느껴질 경우 화상 위험이 있으므로 즉시 전원버튼을 터치하여 제품을 꺼주십시오.

- 5) 기기를 손으로 심하게 구부리거나 접는 행위는 하지 마십시오. 제품에 손상, 파손이 생길 수 있습니다.

- 6) 본 제품을 폐기할 때는 거주 중인 지역의 분리수거 규정에 따라 안전하게 폐기하시기 바라며, 제품을 폐기할 때는 분해하지 마십시오.

아. 안전사고의 예방에 필요한 사항

- 1) 열기와 가까이하지 마십시오.
- 2) 제품 주위에 인화성 물질이나 가연성 물질(살충제, 헤어스프레이, 가스, 기름 기타 잘 타는 물건) 또는 습기가 있는 곳에 두거나 사용하지 마십시오.
- 3) 기기가 낡거나 고장 또는 손상을 입지 않았는지 자주 살펴보십시오.
- 4) 본 기기를 사용하지 않을 때에는 전원을 OFF로 해 두시기 바랍니다.
- 5) 욕실과 같은 습도가 높은 곳에서는 사용하지 마시고, 실내에서 사용하시기 바랍니다.
- 6) 제품에 강한 충격을 주지 마시고, 기기 위에 무거운 물건을 올려놓지 마시기 바랍니다.
- 7) 본 제품은 환자 본인이 사용하셔야 합니다.

07 저장방법

가. 보관조건 혹은 저장방법

- 1) 물이 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 먼지와 습기가 없는 곳에 보관할 것.
- 3) 경사, 진동, 충격(운반 시 포함)등 안정상태에 주의하여 보관할 것.
- 4) 화학약품의 보관 장소나 가스등이 발생하는 장소에 보관하지 말 것.
- 5) 직사광선이 쏘이지 않는 곳에 보관할 것.

나. 환경조건

- 1) 작동 시: 온도(0℃ ~ 35℃), 습도(20% ~ 80%) 기압(800 ~ 1060hPa)
- 2) 보관 시: 온도(-10℃ ~ 40℃), 습도(20% ~ 80%) 기압(800 ~ 1060hPa)

제품 보증서

제품명	노즈버드	보증기간
형명	NB1	1년
구입일자	년 월 일	
보증기간	년 월 일	


고객	주소	
판매점	주소(상호)	

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품 보증서

소 비 자 피 해 유 형			보상내역	
			보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품보유기간 3년이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		제품교환 또는 구입가환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품의 수리를 요하는 경우		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		구입가 환불	
	교환 불가능시			
	수리 가능	하자 발생시	무상수리	유상수리
		통합 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발		제품교환 또는 구입가환불
	수리 불가능시			
	수리용 부품을 보유하고 있지않아 수리가 불가능한 경우			
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 등 발생한 피해		제품교환		
소비자의 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우		무상수리	유상수리
	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
천재지변 (화재, 해, 가스, 풍수해, 낙뢰 등에 의해 고장이 발생하였을 경우, 사용전원의 이상 및 접촉 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우, 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 제조하여 고장이 발생하였을 경우 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우			유상수리	유상수리
상기 보상 규정은 소비자 보호법 제 12조 2항 규정에 의거합니다. 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다. 본 제품은 생산 및 영업 배상 책임 보험에 가입되어 있습니다.			고객상담실 : 구입처 홈페이지 참조	

Nosebud⁺

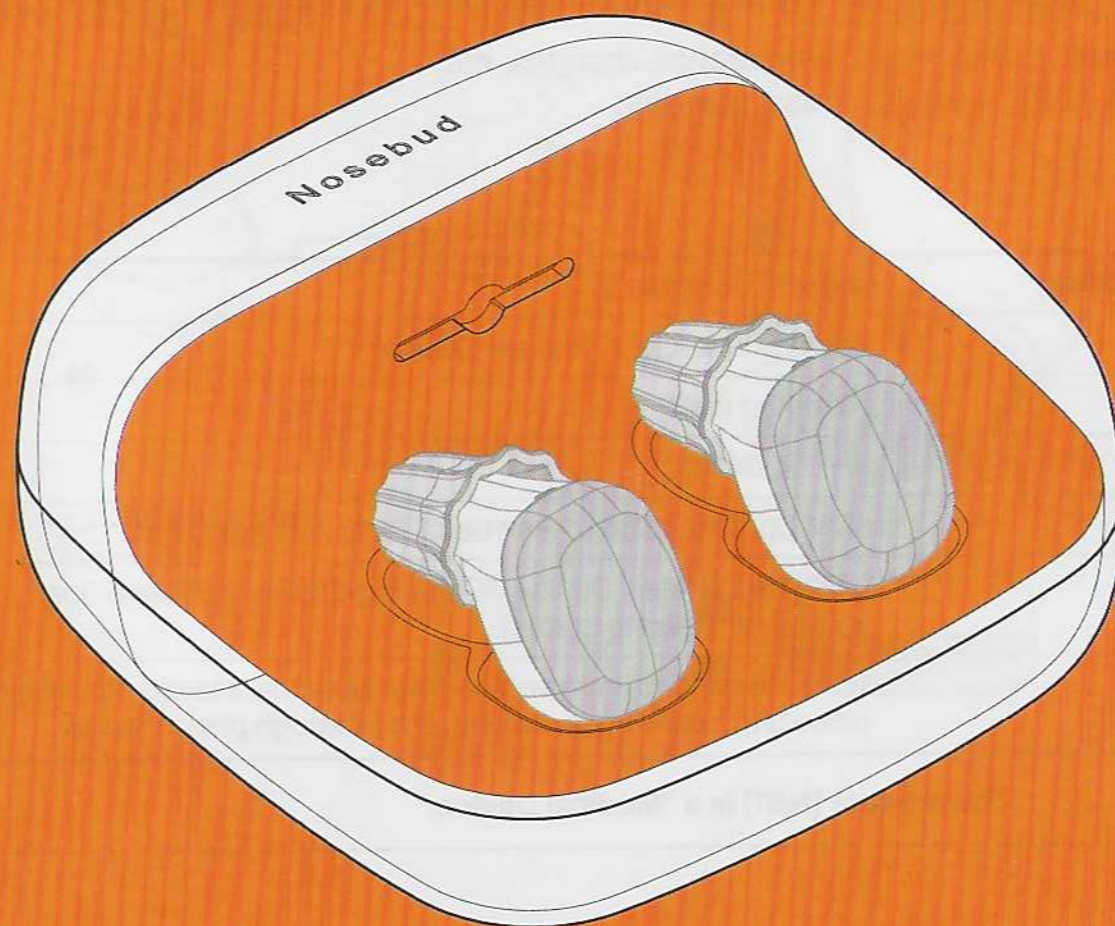

User Manual / Warranty

01 Efficacy of light therapy device

Relieves seasonal allergic rhinitis symptoms by irradiating 660nm red wavelength and 940nm near-infrared wavelength to the rhinitis-affected area in the nose.

| 660nm red wavelength : Antioxidant effect, relief of rhinitis symptoms

The red LED wavelength of 660 nm suppresses free radicals and strengthens the vitality of mucosal dermal cells, alleviating rhinitis symptoms.

| 940nm near-infrared wavelength : Suppress allergic reactions, relieves rhinitis symptoms

The near-infrared wavelength of 940 nm suppresses allergic reactions by inducing appropriate histamine production by mast cells.

| Allergic rhinitis : Hypersensitivity of the nasal mucosa to certain substances

Allergic rhinitis is a disease in which inflammatory cells flock to the irritated area after the nasal mucosa is exposed to allergen-causing substances, causing an inflammatory response due to various mediators secreted by them.

- Causes: pet hair, fine dust, pollen, mites, temperature changes, etc.
- Symptoms: runny nose, stuffy nose, itchiness, sneezing

02 Product overview

Medical device certification [class]	A16060.02 [class 2]
Class name	Lowpowered Light Therapy Device
Product name [Model]	Nosebud [NB1]
Certification number	제인24-648호
manufacturer	NTV Co., Ltd. / Shenzhen Yuefull Electronics Co., Ltd
Packaging unit	[NB1]1Set (2 Main Device, 1Charging Cradle, 4 Silicone tips) and 1 [UV charging cradle]
Purpose of use	A device used to improve and treat seasonal allergic rhinitis symptoms (sneezing, runny nose, itching, etc.) through phototherapy.

The product [NB1] is a “Medical Device.”

03 Specifications

Internal power	DC 3.7V
Wavelength (frequency)	660nm & 940nm
Output (style)	Continuous operation
Operating time	Around 3 minutes
Safety function	1. Automatically turns off after 3 minutes of operation. 2. Touch the power switch for 3 seconds to turn off the power.
Electric shock protection	Internally powered devices, BF type devices


04 Product composition

[NB1] 2 Nosebud main device, 1 Portable charging cradle, 1 Silicone tip container, 4 Silicone tips (2 regular, 2 slim) in the container, 1 Instruction manual


[UV Charging cradle] 1 Charging Cradle (Charging cable is not included.)

A. Nosebud [NB1]

- 1 Main device
- 2 Light guide
- 3 Power switch
- 4 Indicating light


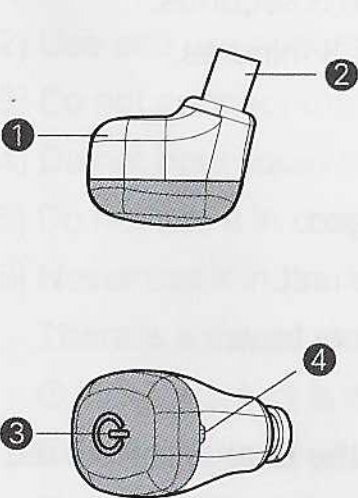


- 5 Portable charging cradle
- 6 Indicating light
- 7 USB-C charging terminal
- 8 Lanyard

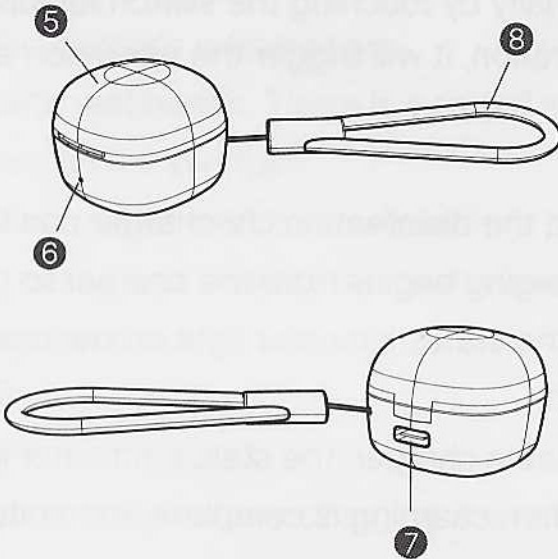

B. UV charging cradle

- 9 UV charging cradle
- 10 UVC sterilizing lamp
- 11 Indicating lights
- 12 USB-C charging terminal

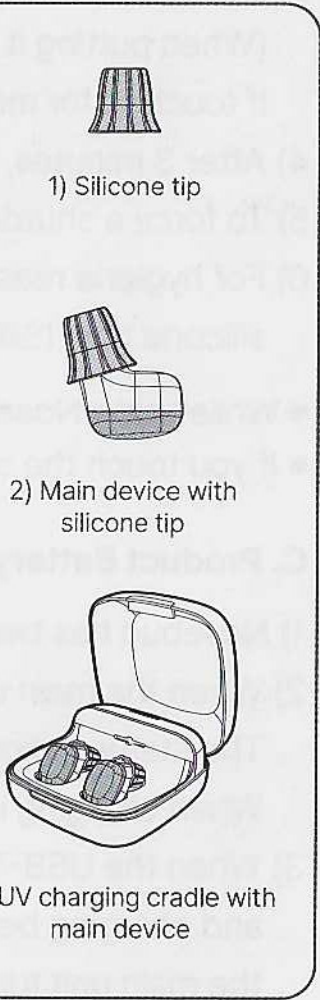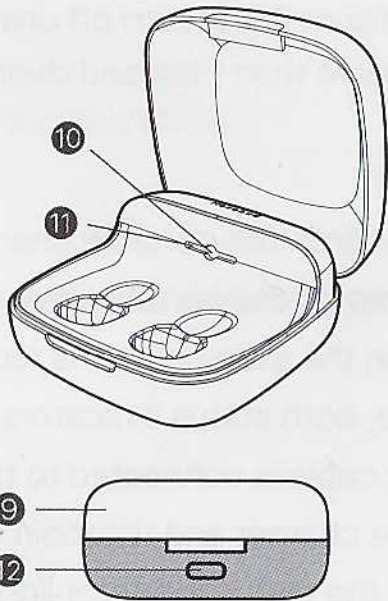

05 How to use


A. Preparation before use

- 1) Before turning on the power, check the location and environment are appropriate.
- 2) Do not leave liquids around the device that may spill and affect the device.
- 3) Since flammable liquids and gases may ignite at the electrodes due to electrical sparks when charging, be sure to check for flammable gases before using the device and be careful.
- 4) Avoid areas with strong electricity, magnetic fields, or areas that may be exposed to heat or humidity.
- 5) Check if the main device (low-power light irradiator) is operating normally.
- 6) Never use this product for purposes other than its intended use.

B. How to use and operating sequence

- 1) Place the enclosed silicone tip to the light guide. (There are two types: regular and slim.)
- 2) Touch the main device power switch for 1 second, the light guide turns on for 3 minutes.
- 3) Gently push the silicone tip side into your nasal cavity.
(When putting it in your nose, make sure not to touch the switch for more than 3 seconds. If touched for more than 3 seconds, the power may be turned off.)
- 4) After 3 minutes, the light guide automatically turns off.
- 5) To force a shutdown, touch the power switch for 3 seconds.
- 6) For hygiene reasons, please do not share silicone tips with others and use separate silicone tips. (Silicone tips can be purchased additionally.)

- ※ While using Nosebud, make sure not to turn off unintentionally by touching the switch for longer than 3 seconds.
- ※ If you touch the switch for more than 1 second during operation, it will trigger the operation again for 3 minutes.

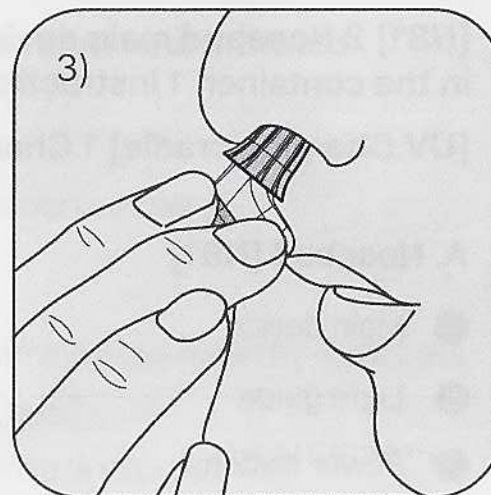

C. Product Battery Charging

- 1) Nosebud has two chargers. Both the portable charger and the disinfection UV charger can be charged.
- 2) When the main unit is placed on the portable charger, charging begins from the charger to the main unit.
The status indicator light on the main unit turns red, and the status indicator light on the charger turns blue.
When charging is complete, both status indicators turn off.
- 3) When the USB-C charging cable is connected to the portable charger, the status indicator light on the charger blinks red and charging begins for the charger and the main unit. When charging is complete, the status indicator light on the main unit turns off and the status indicator light on the charger stops blinking and turns on.
- 4) When the main unit is placed on the disinfection UV cradle, charging begins with the main unit once the lid is closed.
The status indicator light on the main unit turns red. When charging is complete, the status indicator light turns off.
- 5) When the USB-C charging cable is connected to the disinfection stand charger, the status indicator light on the charger blinks red and charging begins for the charger and the main unit. When charging is complete, the status indicator light on the main unit turns off and the status indicator light on the charger stops blinking and turns on.
- 6) The charger for the disinfection stand has a built-in UVC ultraviolet light. When you close the charger lid, the blue light turns on and the UVC disinfection light starts working. The UVC disinfection light and blue light turn off when you open the lid and turn on again when you close it. The UVC disinfection light and blue light automatically turn off after 3 minutes.
(Do not look directly at the UVC disinfection light.)

D. Storage and management method after use

- 1) To reuse the used silicone tip, remove it from the product and wipe it with an alcohol swab or wash it in water and dry it completely before using.

- 2) When cleaning the device after use, be sure to disconnect the charging cable from the device and wipe off any dust, sebum, etc. on the surface of the device with a soft, dry cloth or tissue.
- 3) The device may become deformed, so store it at room temperature and avoid high temperature and humidity.
- 4) Do not store it in a place where chemicals are stored or gas is generated. 5) When not in use for a long period of time, be sure to separate the product and charger.
- 6) Store in a safe place away from vibration or impact.
- 7) Keep out of reach of infants.

06 Precautions for use

A. Warning

- 1) Do not disassemble/repair/modify the product arbitrarily.
- 2) Use and use according to the doctor's prescription.
- 3) Do not connect the power with wet hands. There is a risk of electric shock and fire.
- 4) Do not pour liquid substances on the product.
- 5) Do not use it in conjunction with other medical devices.
- 6) Never use it in the following cases and contact the customer service center for inspection and service.
There is a risk of electric shock and fire.
 - ① If the product is damaged
 - ② If the product gets wet
 - ③ If the USB connector and cable for battery charging are damaged
- 7) The ME device must be connected to an appropriate power source.
(When using an adapter, check the KC certification and rating (Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.35A, Output: 5Vdc, 1A) before use.
- 8) If the ME device is not to be used for a certain period of time, remove the battery. However, battery removal is performed only by our company and the service provider designated by our company.
- 9) The light emitter is a light guide and silicone tip. Please check when using the product.

B. Precautions regarding the age, gender, or health of the target user

- 1) All ages can use it. However, if your skin is sensitive to light, do a small sensitivity test on your sensitive skin before use, and patients with photosensitivity should not use this product. Also, pregnant women, lactating women, women of childbearing age, newborns, infants, children, and the elderly are prohibited from using it.
- 2) Do not allow children to touch or use the device alone.
- 3) If possible, the target of phototherapy should undergo an endoscopic examination to rule out polyposis and sinusitis.
- 4) The following people should consult a doctor before using it.

- Patients with acute diseases
- People with abnormal skin in the area of use
- Patients with high fevers
- Patients with malignant tumors
- People with sensory impairment

C. Precautions regarding adverse reactions to medical devices that may occur as a result of using the medical device, fatal side effects, and accidents due to carelessness in use

- 1) Infrared rays are invisible to the eye. Do not put your eyes close to the infrared LEDs to check if they are working.
- 2) In the following cases, be sure to consult a doctor before using the product.
 - ① If you have or are suspected of having any kind of disease (patients with malignant tumors/cancer patients/patients with high fever/people with extremely weakened vitality/users of life-extending devices, etc.)
 - ② If you have an allergy or hypersensitivity to heat when touching your skin
 - ③ Patients who have recently undergone surgery, pregnant women.
 - ④ If your skin that the product touches has inflammation or trauma, etc.

D. General precautions

- 1) Do not forcefully wrap or bend the cable. There is a risk of malfunction, electric shock, or fire.
- 2) Do not place flammable substances such as candles, cigarettes, or alcohol, or containers containing water, heavy objects, or sharp objects on top of the product. This may cause electric shock, fire, or damage.
- 3) Do not impact or drop the product.
- 4) Do not clean the device with organic solvents (benzene, thinner, etc.).
- 5) Keep the product away from heating appliances such as stoves.
- 6) Do not use excessive force on the power button. It may cause product failure.
- 7) Do not hold the charging cable and swing or turn it while it is connected. It may cause injury and product failure.

E. Precautions for interaction

- 1) Be careful as there is a risk of danger when using it with other devices
- 2) Do not use it if you have an allergic reaction to light or are taking medications that may cause such reactions.
- 3) Do not use it with objects that may cause electric shock.
- 4) Do not use it with alcohol or flammable liquids/gases.

F. Precautions for use by pregnant women, nursing women, women of childbearing age, newborns, infants, children, and the elderly

- 1) Pregnant women, nursing women, women of childbearing age, newborns, infants, children, and the elderly should refrain from using it as their skin may be sensitive and may cause allergies.

G. Caution for application

- 1) Do not expose the product to excessive heat such as sunlight or fire.
- 2) Do not apply skincare products, cosmetics, or medicines to the nose and around the nose before and while using the product.
- 3) If you have sensitive skin, consult a doctor before using.
- 4) If you feel hot, immediately turn off the product by touching the power button to avoid the risk of burns.
- 5) Do not bend or fold the device severely by hand. This may cause damage or breakage of the product.
- 6) When disposing of this product, please dispose of it safely in accordance with the recycling regulations of your area.
Do not disassemble the product when disposing of it.

H. Precautions for preventing safety accidents

- 1) Keep away from heat.
- 2) Do not place or use the product near flammable or combustible materials (insecticides, hairspray, gas, oil, or other easily flammable items) or in humid places.
- 3) Check the device frequently to see if it is worn out, broken, or damaged.
- 4) Turn off the power when not using the device.
- 5) Do not use it in places with high humidity such as bathrooms, and use it indoors.
- 6) Do not subject the product to strong impacts or place heavy objects on top of the device. 7) This product must be used by the patient himself/herself.

07 Storage method

A. Storage conditions or storage method

- 1) Store in a place that does not come into contact with water.
- 2) Store in a place free of dust and moisture.
- 3) Store with care to maintain stability, such as tilt, vibration, and impact (including during transport).
- 4) Do not store in a place where chemicals are stored or gas is generated.
- 5) Store in a place away from direct sunlight.

B. Environmental conditions

- 1) Operation: Temperature (0°C~35°C), humidity (20%~80%), atmospheric pressure (800~1060hPa)
- 2) Storage: Temperature (-10°C~40°C), humidity (20%~80%), atmospheric pressure (800~1060hPa)

Product Warranty

Product Name		Nosebud	
Model		NB1	
Date of purchase			
Warranty		1 year after purchase	

customer	name		Phone no.
	address		
store	name		Phone no.
	address		

Please be sure to fill in the blank information.

Consumer Compensation Information

Consumer Damage Type			Compensation details	
			Within the warranty	After the warranty period
In case of performance or functional failure that occurs under normal use conditions (Parts retention period within 3 years)	If major repairs are required within 10 days of purchase		Product exchange or refund	
	If repair of important parts is required within 1 month of purchase		Product Exchange	
	If the exchanged product requires major repairs within 1 month		refund	
	When exchange is not possible			
	repair possible	In case of defect	Free repair	Paid repair
		The integrated defect was repaired, but the problem reoccurred		Product exchange or refund
	If repair is not possible			
	If repair is not possible because repair parts are not available			
	If the business owner loses the product that the consumer requested repairs			
Damages incurred during product purchase, transportation, product installation, etc.		Product exchange		
functional failure due to consumer	When repair is possible		Free repair	Paid repair
	When repair is not possible		Product exchange after collecting paid repairs	company's standards
a malfunction occurs due to external causes other than a defect in the product itself or unauthorized repair			Paid repair	Paid repair
The above compensation provisions are in accordance with Article 12, Paragraph 2 of the Consumer Protection Act. Matters not specified are subject to consumer damage compensation regulations. This product is covered by production and sales liability insurance.			Customer Service Center : Please refer to the seller's website	